
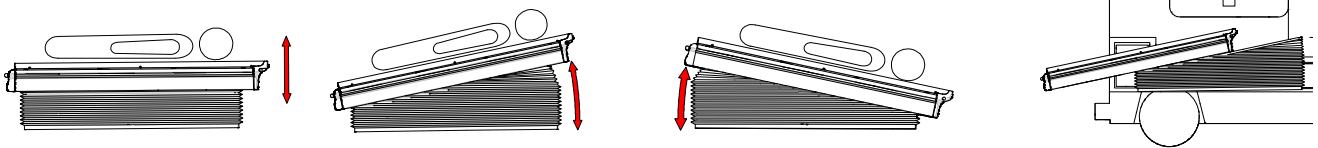


BOB GALAXY

Soporte para camillas

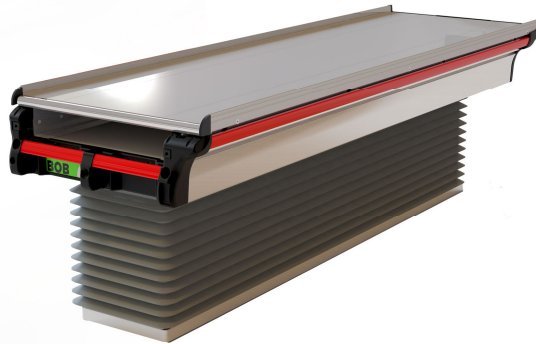

Soporte para camillas para ser utilizado en ambulancias. Puede asumir varias posiciones que facilitan tanto la carga como la descarga de la camilla que permite al mismo tiempo un acceso a la camilla.

Características específicas

- El diseño patentado permite reducir las dimensiones generales aumentando el espacio disponible entre el asiento y el pasillo de los socorristas.
- La estructura del plan de soporte lo hace indeformable.
- Sistema de carga con rodillo (tobogán opcional)
- Compartimento dedicado a los sistemas de inmovilización, tabla espinal, camilla cuchara.
- Asume las posiciones de inclinación frontal y trasera.
- Sistema de altura regulable electrónicamente para cargar la camilla.
- Plano de aluminio extruido completamente desinfectable.
- Panel de comando para el control de sistemas integrado en la estructura principal con una posición personalizable.
- Manijas de extracción y traslación fácilmente accesibles
- Suspensión regulable automáticamente según el peso del paciente.
- Bloqueable para permitir masaje cardiaco
- Salida automática de la plataforma con inclinación para facilitar las operaciones de carga / descarga de la camilla.
- Traslable manualmente (derecha /izquierda)
- Reposicionamiento automático en posición horizontal una vez que la plataforma está en el medio

Normas de referencia

- Probado 10g en acuerdo al EN1789:2007+A2:2014
- EN 1865-5:2012
- ECE-R-10

Accesorios

- BO10103 – Electric pack (Luces LED y toma de encendedor de cigarrillos 12V)

Accesorios opcionales

- BO10100 – tobogán de 120 mm
- BO10101 – tobogán de 180 mm
- BO10102 – tobogán de 350 mm
- BO10104 – tobogán de 500 mm
- Toma de oxígeno en la parte anterior
- Sistema de nivelación adaptable para la carga y descarga de la camilla.

Datos técnicos

Longitud	2010 mm
Ancho	600 mm
Altura mínima	375 mm
Alteza máxima	580 mm
Traslación	230 ± 10 mm
Inclinación frontal	10°
Inclinación trasera	15°
Materiales	Al, Acciaio, PE, Nylon
Capacidad	300 kg
Peso	110 ± 10 kg

Dispositivo según dir. 2006/42/CE

BO10000 - BOB GALAXY - SOPORTE DE CAMILLA AMORTIGUADOR ALIM. EL.



Rev.4 (29/08/2019)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
spencer.it