
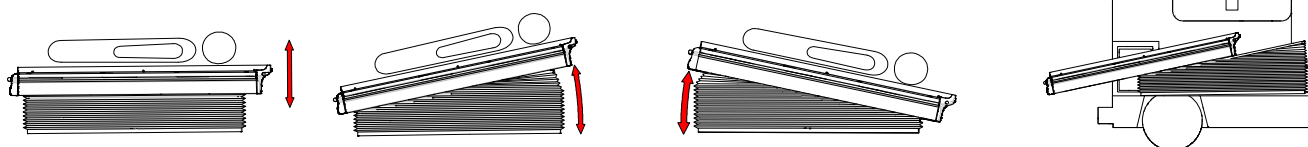


BOB GALAXY

Support de brancard

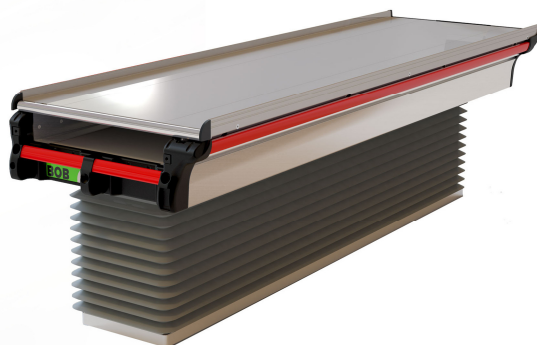

Supports de brancard destinés à être installés sur des ambulances. L'appareil peut prendre plusieurs positions facilitant le chargement et le déchargement de la brancard.

Caractéristiques Spécifiques

- La conception brevetée augmente l'espace disponible pour les sauveteurs
- La structure du plan de support le rend indéformable
- Système de chargement avec rouleau (glissière facultative)
- Compartiment dédié pour stocker les systèmes d'immobilisation tels que les plan durs ou les civières de relevage
- Peut assumer les positions d'inclinaison avant et arrière
- Système de réglage en hauteur à commande électronique dédié pour faciliter le chargement du brancard
- Plan d'aluminium extrudé facile à nettoyer
- Le panneau de commande peut être intégré à la structure et sa position peut être personnalisée
- Les poignées de fonctionnement sont facilement accessibles
- Suspension réglée automatiquement en fonction du poids du patient
- Verrouillable permettant d'effectuer la RCP
- Extraction en position inclinée pour faciliter le chargement / déchargement du brancard
- Peut être déplacé manuellement sur le côté (à gauche et à droite)
- L'appareil revient automatiquement en position horizontale une fois qu'il est déplacé à l'intérieur du véhicule

Reference standard

- 10g testé selon la EN1789:2007+A2:2014
- EN 1865-5:2012
- ECE-R-10

Equipement Standard

- BO10103 - Electric pack (Prise de lumière Led et prise allume-cigare 12V)

Accessoires optionnels

- BO10100 – rampe 120 mm
- BO10101 – rampe 180 mm
- BO10102 – rampe 350 mm
- BO10104 - rampe 500 mm
- BO10107 – Bassin pour logement u plan dur
- Prise d'oxygène à l'avant
- Système de réglage en hauteur adaptatif

Données Techniques

Longueur <small>(panneau de commande non considéré)</small>	2010 mm
Largeur	600 mm
Hauteur minimum	375 mm
Hauteur maximale	580 mm
Mouvement latéral	230 ± 10 mm
Angle d'inclinaison avant	Max 10°
Angle d'inclinaison vers l'arrière	Max 15°
Matériaux	Al, Steel, PE, Nylon
Charge maximale	300 kg
Weight	110 ± 10 kg

Dispositif conforme à la dir. 2006/42/CE

- BO10000 – BOB GALAXY - SUPPORT DE BRANCARD ÉLECTRIQUE ABSORBANT LES CHOCS



Rev.4 (29/08/2019)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
spencer.it