


CINCO MAS

Camilla autocargante 10g con 5 alturas

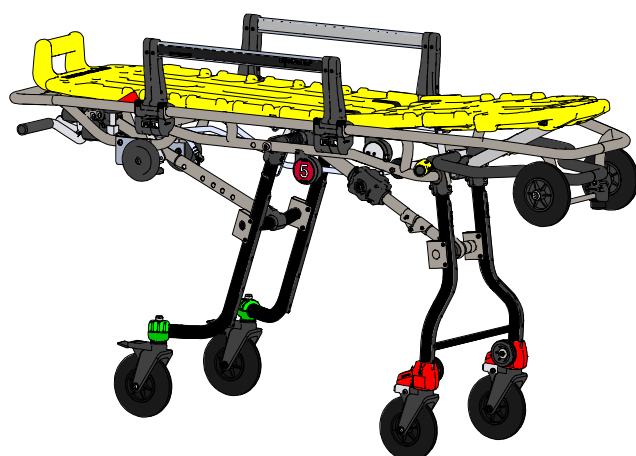

Spencer Cinco Mas es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera con 5 alturas variables, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga. Certificada 10G si utilizada con el sistema de anclaje *Sensor Lock*.

Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza
 Respaldo ajustable
 Posición antishock Trendelenburg
 Manejabilidad absoluta gracias al sistema Twist que, una vez activado, convierte en pivotantes también las ruedas anteriores.
 Frenos en las ruedas posteriores
 Barrandillas reclinables *Safe bar*
 Sistema de 5 alturas ajustables
 Sistema Sharp *Sensor lock* integrado en la palanca de desbloqueo de las patas. Permite liberar la camilla del sistema de anclaje sin tener que actuar directamente sobre el enganche
 El sistema que desbloquea y regula las alturas de la camilla es ubicado de manera estratégica para mayor comodidad del operador.
 El sistema patentado de apertura y cierre de la pata delantera reduce el esfuerzo requerido por el operador y hace que este movimiento sea mucho más suave.

Accesorios opcionales necesarios

CR90013B Extensión carro de carga Cinco Mas

Accesorios opcionales

ST42706C	Anclaje 10g <i>Sensor Lock</i> <small>(Obligatorio para versiones 10G)</small>
EN90003C	END-T Mesita para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00499B	STX 499 – correa 4 pz. torácica regulab. univers
IF01047C	Track 4-30 portasuero telescópico
IF01049B	Track 5 portasuero telescópico para Carrera
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>Safe Bar</i>

Accesorios estandar

ST70000A	QMX777- Colchón anat. Pvc negro
ST00497B	DNA STRAP CINTURONES CON ENROLLADOR INTEGRADO
ST00498B	DNA STRAP TORÁCICO

Datos técnicos

Longitud	1970 mm
Ancho	570 mm
Peso	43 Kg
Capacidad de carga	250 kg
Ruedas	ø200mm ± 5%
Altura debajo de la rueda de carga	75 cm
Material chasis	Acero
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandilla	200 mm

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CINCO MAS 75 T YELLOW PLAT.

CERTIFICADA 10G

Clasificación CND

V0899



Rev.1 (12/03/2019)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it