


## CINCO MAS

Barella autocaricante 10g con 5 altezze

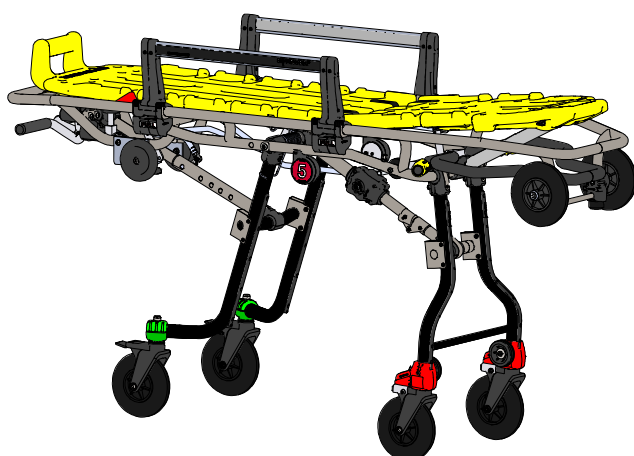

Spencer Cinco Mas è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera a 5 altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. Certificata 10G se utilizzata con il sistema di fissaggio *Sensor Lock*.

### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile  
 Schienale regolabile  
 Posizioni antishock Trendelenburg  
 Manovrabilità estrema grazie al sistema Twist che, se azionato, rende pivotanti anche le ruote anteriori.  
 Freni sulle ruote posteriori  
 Sponde reclinabili *Safe bar*  
 Sistema a 5 altezze variabili  
 Sistema *Sharp sensor lock integrato* nella maniglia di sblocco delle gambe, che consente di sbloccare la barella dal sistema di fissaggio senza dover azionare comandi sul fissaggio stesso  
 Sistema di sblocco delle altezze variabili logicamente posizionato per migliorare l'usabilità  
 Il sistema di apertura e chiusura della gamba anteriore brevettato consente di ridurre lo sforzo richiesto all'operatore, oltre a rendere tale movimento decisamente più scorrevole

### Accessori opzionali necessari

CR90013B Prolunga avanzamento Cinco Mas

### Accessori opzionali

ST42706C Fissaggio 10g sensor lock <sup>(Obbligatorio per versioni 10G)</sup>  
 EN90003C END-T Tavolino per barelle cert.10G  
 ST00491A STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle  
 ST00499B STX 499 - cintura 4 pz. toracica regolab. univers  
 IF01047C Track 4-30 portaflebo telescopico  
 IF01049B Track 5 portaflebo telescopico per Carrera  
 CB09025C Tanker portab.giallo per sponda barella  
 CB09028C Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

### Accessori di serie

ST70000A QMX777- Materasso anat. pvc nero  
 ST00497B DNA STRAP-Cintura con arrot. integrato  
 ST00498B DNA STRAP TORACICA -Cintura con arrot. integrato

### Dati tecnici

Lunghezza	1970 mm
Larghezza	570 mm
Peso	43 Kg
Portata	250 kg
Ruote	ø200mm ± 5%
Altezza sotto ruota carrello di carico	75 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CINCO MAS 75 T P/GIALLO

CERTIFICATA 10G

Classificazione CND

V0899



Rev.1 (12/03/2019)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)