


CINCO MAS

Camilla autocargante 10g con 5 alturas

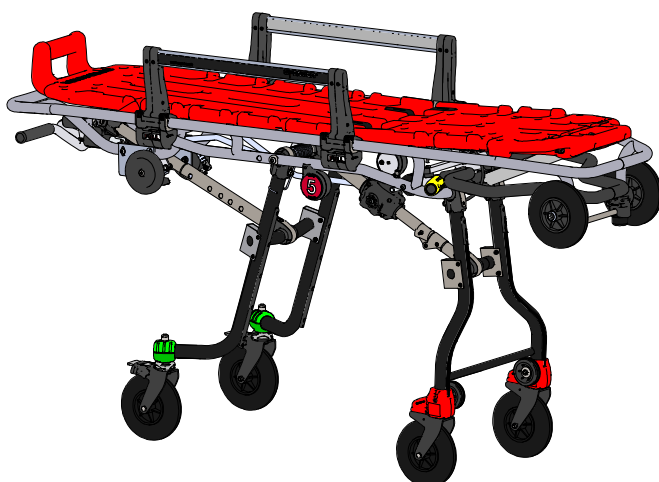

Spencer Cinco Mas es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera con 5 alturas variables, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga. Certificada 10G si utilizada con el sistema de anclaje Sensor Lock.

Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza
 Respaldo ajustable
 Posición antishock Trendelenburg
 Manejabilidad absoluta gracias al sistema Twist que, una vez activado, convierte en pivotantes también las ruedas anteriores
 Frenos en las ruedas posteriores
 Sponde reclinabili *Safe bar*
 Sistema a 5 altezze variabili
 Sistema Sharp Sensor lock integrado en la palanca de desbloqueo de las patas. Permite liberar la camilla del sistema de anclaje sin tener que actuar directamente sobre el enganche. El sistema que desbloquea y regula las alturas de la camilla es ubicado de manera estratégica para mayor comodidad del operador. El sistema patentado de apertura y cierre de la pata delantera reduce el esfuerzo requerido por el operador y hace que este movimiento sea mucho más suave

Accesorios opcionales necesarios

CR90013B Extensión carro de carga Cinco Mas

Accesorios opcionales

ST42706C Anclaje 10g Sensor Lock (Obligatorio para versiones 10G)
 EN90003C END-T Mesita para camillas cert.10G
 ST00491A STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
 ST00499B STX 499 – correa 4 pz. torácica regulab. univers
 IF01047C Track 4-30 portasuero telescópico
 IF01049B Track 5 portasuero telescópico para Carrera
 CB09025C Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barandilla de la camilla
 CB09028C Soporte de fijación del portatanque Safe Bar

Accesorios estándar

ST70000A QMX777- Colchón anat. Pvc negro
 ST00497B DNA STRAP cinturones con enrollador integrado
 ST00498B DNA STRAP TORÁCICO

Datos técnicos

Longituda	1970 mm
Ancho	570 mm
Peso	42 Kg
Capacidad de carga	250 kg
Ruedas	ø200mm ± 5%
Altura de bajo de la reuda de carga	65 cm
Material chasis	Acciaio inox
Longitud barandilla	680 mm
Alto barandillas	200 mm

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CINCO MAS 65 T P/ROJA
 CERTIFICADA 10G
 Clasificación CND
 V0899



Rev.0 (12/03/2019)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it