


CINCO MAS

Barella autocaricante 10g con 5 altezze

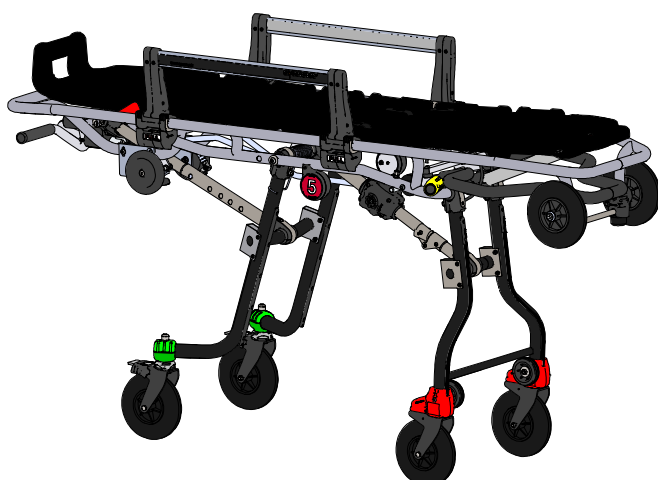

Spencer Cinco Mas è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera a 5 altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. Certificata 10G se utilizzata con il sistema di fissaggio *Sensor Lock*.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Schienale regolabile
Posizioni antishock Trendelenburg
Manovrabilità estrema grazie al sistema Twist che, se azionato, rende pivotanti anche le ruote anteriori.
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Sistema a 5 altezze variabili
Sistema <i>Sharp sensor lock integrato</i> nella maniglia di sblocco delle gambe, che consente di sbloccare la barella dal sistema di fissaggio senza dover azionare comandi sul fissaggio stesso
Sistema di sblocco delle altezze variabili logicamente posizionato per migliorare l'usabilità
Il sistema di apertura e chiusura della gamba anteriore brevettato consente di ridurre lo sforzo richiesto all'operatore, oltre a rendere tale movimento decisamente più scorrevole

Accessori opzionali necessari

CR90013B	Prolunga avanzamento Cinco Mas
----------	--------------------------------

Accessori opzionali

ST42706	Fissaggio 10g sensor lock ^(Obbligatorio)
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00499B	STX 499 - cintura 4 pz. toracica regolab. univers
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

Accessori di serie

ST70000A	QMX777- Materasso anat. pvc nero
ST00497B	DNA STRAP-Cintura con arrot. integrato
ST00498B	DNA STRAP TORACICA -Cintura con arrot. integrato

Dati tecnici

Lunghezza	1970 mm
Larghezza	570 mm
Peso	43 Kg
Portata	250 kg
Ruote	∅200mm ± 5%
Altezza sotto ruota carrello di carico	75 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CINCO MAS 75 T P/NERO
CERTIFICATA 10G

Classificazione CND
V0899



Rev.0 (12/03/2019)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it