


CARRERA TEC SHARP

Barella autocaricante 10g con sistema di sgancio rapido integrato

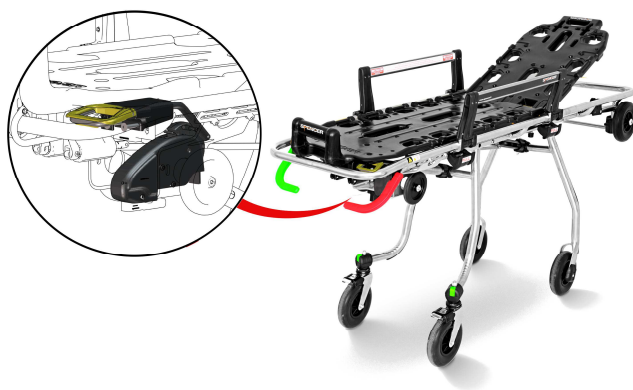

Spencer Carrera TEC SHARP è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. Carrera TEC Sharp integra un sistema manuale strategicamente posizionato sul maniglione dei comandi che permette di sbloccare la barella dal fissaggio S-MAX.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizione antishock Trendelenburg
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili *Safe bar*
Grazie all'integrazione del sistema Sharp, non è più necessario agire sul sistema di fissaggio per sbloccare la barella
Nota: Il sistema Sharp è compatibile solamente con il fissaggio S-MAX

Accessori opzionali

Accessori opzionali	(Obbligatorio per versioni 10G)
ST42707B	Sistema di fissaggio 10g S-Max
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
ST00499B	STX 499 - cintura 4 pz. toracica regolab. univers
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

Accessori di serie

Materasso termosaldato anatomico PVC nero
Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere
Sistema Sharp

Dati tecnici

Lunghezza	1980 mm
Larghezza	585 mm
Peso senza accessori di serie	35 kg
Portata	170 kg
Ruote	ø200 mm ± 5%
Altezza sotto ruota carrello di carico	60 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

Dimensioni e pesi soggetti a tolleranze rispettivamente di ±10mm e ± 1kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA SHARP T TEC T/CROMO
P/NERO C/MAT CERT.10G
CA70015E



Classificazione CND

V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it