


# CARRERA TEC SHARP

Camilla Autocargante 10g con sistema integrado para liberación rápida

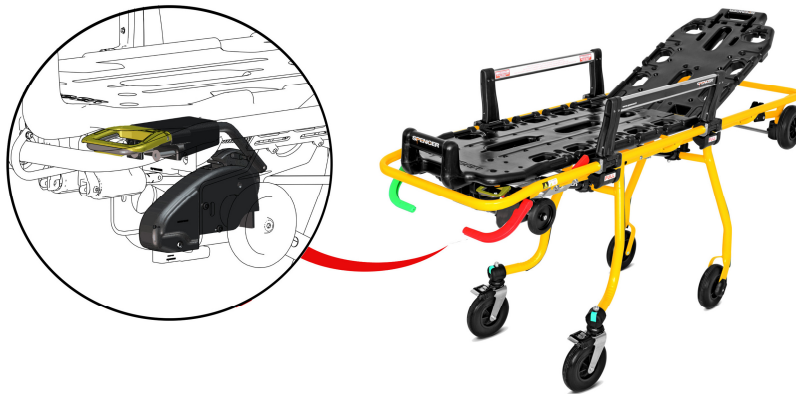

Spencer Carrera TEC SHARP es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga. Carrera TEC Sharp incorpora un sistema manual, estratégicamente ubicado en la manija de los controles, que permite desbloquear la camilla de su anclaje S-MAX.

### Características específicas

- Plataforma en polietileno de fácil limpieza
- Controles codificados por color
- Respaldo ajustable
- Plataforma con posición antishock Trendelenburg
- 2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo
- Frenos en las ruedas traseras
- Barandillas reclinables *Safe bar*
- Gracias a la integración del sistema Sharp, ya no es necesario actuar sobre el sistema de anclaje para desbloquear la camilla Nota: el sistema Sharp es compatible únicamente con el anclaje S-MAX

### Accesorios opcionales

ST42707B	Sistema de anclaje 10g S-Max <small>(Obligatorio para versiones 10G)</small>
EN90003C	END-T Mesita para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
ST00499B	STX 499 - cinturón 4 pz. torácica regulable universal
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescópico
IF01049B	Track 5 Portasuero telescópico para Carrera
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	SopORTE de fijación del portatanque <i>para</i> Safe Bar

### Accesorios estandar

- Colchón termosoldado anatómico PVC nero
- Cinturones STX 702 dos piezas de metal reflex negros
- Sistema Sharp

### Datos Técnicos

Longitud	1980 mm
Ancho	585 mm
Peso sin accesorios de serie	35 kg
Capacidad de carga	170 kg
Ruedas	Ø200 mm ± 5%
Altura debajo del nivel de carga	60 cm
Material chasis	Acero inoxidable
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandillas	200 mm

Dimensiones y pesos son sujetos a tolerancias respectivamente de ±10mm y ± 1kg

### DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA SHARP T TEC T/AMARILLO  
P/NEGRO C/MAT CERT.10G

CA70016

Clasificación CND



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)