


CROSSOVER SHARP

10G Camilla auto cargable con sistema de liberación rápido integrado.

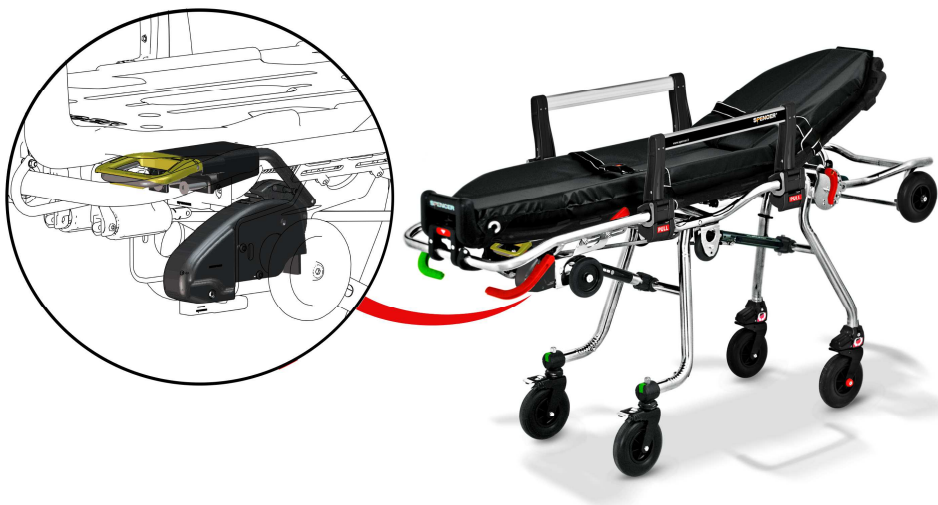

Spencer Crossover Sharp es una camilla auto cargable con alturas ajustables para el transporte del paciente. Es una camilla compacta y ligera, para utilización en las operaciones de rescate en las calles y vehículos de rescate. Las patas se pliegan de forma independiente, activando los comandos dedicados durante el procedimiento de descarga, se abren automáticamente. El carro de carga se puede plegar para hacer el movimiento más fácil en espacios confinados. Crossover Sharp integra un sistema manual estratégicamente colocado cerca de los comandos, que permite desbloquear la camilla de la fijación S-MAX.

Características específicas

Tablero de polietileno fácil de limpiar
Comandos codificados con colores
Respaldo ajustable
Posición de Trendelenburg antishock
Extrema maniobrabilidad gracias al sistema Twist que, una vez activado, hace pivoteantes también las ruedas delanteras
Frenos en las ruedas traseras
Barras laterales plegables Safe bar
Sistema de alturas ajustables
Carro de carga plegable
Gracias a la integración del sistema Sharp, ya no es necesario tocar el sistema de fijación para desbloquear la camilla
Nota: El sistema Sharp es compatible sólo con el anclaje S-MAX

Equipamiento estándar

PVC Colchoneta Anatómica QMX/777
STX 702 Dos cinturones negros de metal reflex
Sistema Sharp

Datos Técnicos

Longitud	1980 mm
Longitud acortada	1660 mm
Ancho	580 mm
Peso sin equipamiento estándar	45 kg
Capacidad de carga	250 kg
Ruedas	Ø200 mm
Altura ruedas del carro de carga	Desde 52 hasta 70 cm
Material del marco	Acero
Longitud de las barras laterales	680 mm

Accesorios opcionales

ST42707B	Sistema de fijación 10G S-Max
EN90003C	Mesa para camillas cert. 10G.
ST00491A	STX 90 apoyo para la cabeza telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP correa con sistema enrollador
ST00498B	DNA STRAP correa torácica con sistema enrollador
IF01047C	Porta Suero Track 4-30 telescópico
CB09025C	Porta tanque de oxígeno, ajustable a la barra lateral de la camilla
CB09028C	Soporte porta tanque de oxígeno para Safe Bar

Class I Dispos. Médicos de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CROSSOVER SHARP T CROMO PLANO
NEGRO CON COLCHONETA QMX777
CERT.10G

CR70014

Clasificación CND



V0899

Rev.1(18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it