


## CROSSOVER SHARP

Camilla automática 10G con sistema integrado de liberación rápida

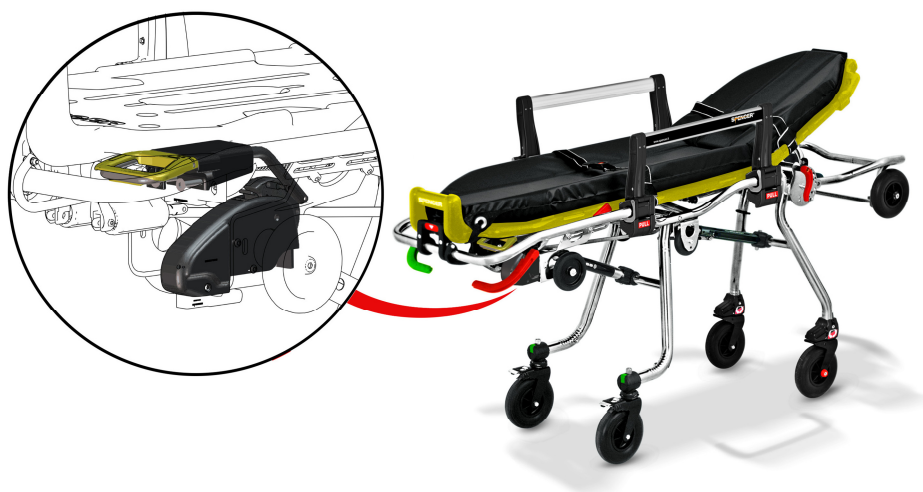

Spencer Cross es una camilla automática, compacta y ligera, con alturas variables, para el transporte de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga. La parte del chasis en correspondencia del respaldo se puede doblar para facilitar el manejo en espacios pequeños. Crossover Sharp integra un sistema manual ubicado de manera estratégica en la manija de los controles, que permite liberar la camilla de su anclaje S-MAX.

### Características específicas

- Plataforma en polietileno de fácil limpieza
- Controles codificados por color
- Respaldo ajustable
- Posición antishock Trendelenburg
- 2 ruedas posteriores giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo
- Sistema Twist que se puede manejar desde la manija de los controles, para que las ruedas delanteras se conviertan en giratorias
- Frenos en las ruedas posteriores
- Barandillas reclinables *Safe bar*
- Sistema altura variable para facilitar la carga del paciente
- Carro de carga plegable, para minimizar el tamaño
- Gracias a la integración del sistema Sharp, no es necesario actuar sobre el sistema de anclaje para liberar la camilla.
- Nota: El sistema Sharp es compatible únicamente con el anclaje S-MAX

### Accesorios opcionales

ST42707B	sistema de anclaje 10g S-Max <small>(Obligatorio para versiones 10G)</small>
EN90003C	END-T mesa para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescópico
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i>

### Accesorios estandar

- Colchón anatómico en PVC QMX/777
- Cinturones STX 702 dos piezas metal reflex negras
- Sistema SHARP

### Datos técnicos

Longitud	1980 ± 10 mm
Longitud acortada	1660 ± 10 mm
Ancho	580 ± 10 mm
Peso sin accesorios estandar	45 ± 1 kg
Capacidad de carga	250 kg
Ruedas	∅200 mm ± 5%
Altura debajo del nivel de carga	Da 52 a 70 cm
Material chasis	Acero inoxidable
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandilla	200 mm

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CROSSOVER SHARP T T/CROMO  
P/AMAR C/QMX777 CERT.10G  
CR70015



ClasificaciónCND

V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)