


CROSS SHARP

Camilla automática 10G con sistema integrado de liberación rápida

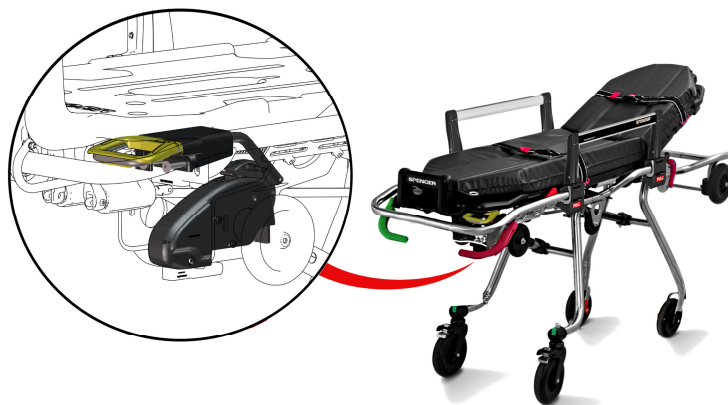

Spencer Cross es una camilla automática, compacta y ligera, con alturas variables, para el transporte de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga. La parte del chasis en correspondencia del respaldo se puede doblar para facilitar el manejo en espacios pequeños. Cross Sharp integra un sistema manual ubicado de manera estratégica en la manija de los controles, que permite liberar la camilla de su anclaje S-MAX.

Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza
Controles codificados por color
Respaldo ajustable
Posición antishock Trendelenburg
2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo
Frenos en las ruedas posteriores
Barandillas reclinables <i>Safe bar</i>
Sistema altura variable para facilitar la carga del paciente
Carro de carga plegable, para minimizar el tamaño
Gracias a la integración del sistema Sharp, no es necesario actuar sobre el sistema de anclaje para liberar la camilla.
Nota: El sistema Sharp es compatible únicamente con el anclaje S-MAX

Accesorios opcionales

ST42707B	sistema de anclaje 10g S-Max <small>(Obligatorio para versiones 10G)</small>
EN90003C	END-T mesa para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescópico
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i>

Accesorios estandar

Colchón anatómico en PVC QMX/777
Cinturones STX 702 dos piezas metal reflex negras
Sistema Sharp

Datos técnicos

Longitud	1980 ± 10 mm
Longitud acortada	1660 ± 10 mm
Ancho	580 ± 10 mm
Peso ¹⁾	45 ± 1 kg
Capacidad de carga	170 kg
Ruedas	Ø200 mm ± 5%
Altura debajo del nivel de carga	Da 52 a 70 cm
Material chasis	Acero inoxidable
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandilla	200 mm
<small>1) Sin accesorios estandar</small>	

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CROSS SHARP T T/CROMO P/NEGRO
C/QMX777 CERT.10G
CR70016



Clasificación CND

V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it