


QMX 02

Coussin repose-tête multi-niveau

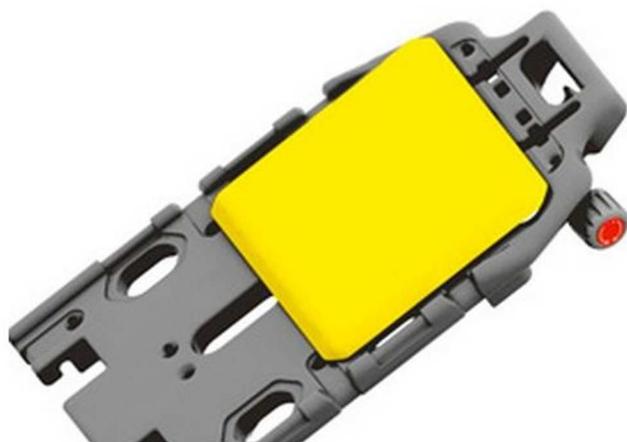

Repose tête avec épaisseur réglable pouvant être installé sur le relève buste des brancard Spencer. L'épaisseur se règle à l'aide d'une molette agissant sur un système de ressorts placées à l'intérieur du coussin.

Caractéristiques spécifiques

- Facile à nettoyer
- Molette de réglage de simple accès et utilisation
- Parfait intégration avec le relève buste du brancard
- Poids extrêmement contenu

Données techniques

Dimensions	330x300 mm
Matériaux	PVC, PE
Poids	970 g
Epaisseur réglable	da 35 a 75 mm

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

REPOSE TETE ANATOMIQUE
MULTI-NIVEAU

QM50002A

Classification CND V0899

Identifiant d'enregistrement 171905



Rev.0 (09/12/2014)

COPIE NON CONTROLÉE – futures révisions seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it