


SED

Extricador/inmovilizador espinal

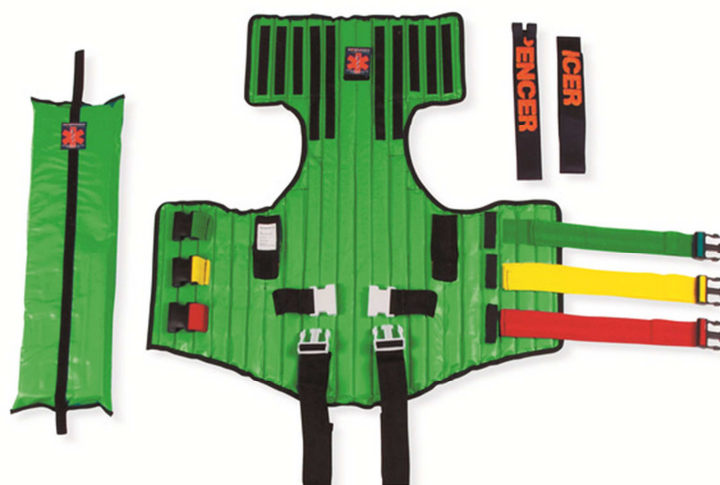

El chaleco de extricación SED es un dispositivo de primeros auxilios para ser empleado en la extricación de un paciente traumatizado de un vehículo. Se debe emplear con posterioridad a la aplicación del collarín cervical, para mantener la inmovilización y alineación cabeza-tronco.

Características específicas

Cinturones y sus hebillas son de diversos colores para hacer más intuitivo y rápido tanto la localización como el correcto enganche
 Revestimiento de PVC para asegurar el saneamiento eficaz
 La separación de los elementos rígidos, permite una alta rigidez vertical y flexibilidad horizontal
 Cojín para la zona de la nuca

Datos técnicos

Longitud	830 mm
Anchura	900 mm
Espesor máximo ⁽¹⁾	25 mm
Dimensiones enrollado con bolsa (aprox.)	850 x 250 x 120 mm
Longitud correas	74 ± 2 cm
Materiales	PVC, Nailon, PP
Peso sin bolsa	2,60 kg
Peso con bolsa	2,85 kg
Capacidad máxima	230 kg

⁽¹⁾ en correspondencia con los ganchos o hebillas

Equipamiento de serie

Bolsa de transporte

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

SED INMOBILIZADOR DE COLUMNA



SR00111B

Clasificación CND

V0804

ID de registro

102330

NATO stock n° 6515-15-149-8710

Rev.0 (30/11/2020)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it