


B-BAK PIN

Tavola spinale con pin

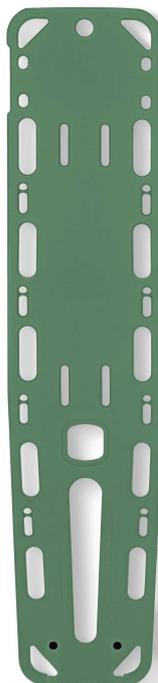

Le tavole spinali B-bak Pin sono dispositivi destinati a sollevare e immobilizzare pazienti con sospette lesioni alla colonna vertebrale.

Caratteristiche specifiche

- Il numero elevato di maniglie, il loro posizionamento e la loro conformazione, agevola la presa anche in condizioni difficili
- La forma rastremata consente di minimizzare gli ingombri e di alloggiarla all'interno delle barelle basket Spencer
- Superfici lisce e raccordate per garantire efficace igienizzazione
- Struttura robusta e leggera per garantire elevata resistenza agli urti
- Pattini sul lato inferiore della scocca per minimizzare gli attriti durante le operazioni di applicazione
- Lo spessore estremamente ridotto ne agevola l'applicazione e lo stoccaggio
- I pin di cui è dotata consentono il fissaggio agevole di cinture con moschettone opzionali

Dati tecnici

| | |
|--------------------|--------------------|
| Dimensioni | 1840 x 405 x 45 mm |
| Materiale | PE |
| Numero di maniglie | 14 |
| Numero di pin | 8 |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 6 kg |

Accessori opzionali

| | |
|----------|--|
| ST02105A | Fix board – fissaggio verticale tavole spinali 10g |
| ST02108A | Fix board – fissaggio orizz. tavole spinali 10g |
| ST02035A | Rock Straps – Sistema di cinture universali per tavola spinale |
| ST00494B | STX 494 – Set di 3 cinture con moschettone |
| ST02106A | Mark-Up – Sistema di personalizzazione permanente |
| SH00201A | Spencer Contour – Fermacapo universale anatomico |

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

B-BAK PIN MILITARY - tavola spinale con pin



ST02069B

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Classificazione CND | V0804 |
| Identificativo registrazione | 101252 |

Rev.0 (14/06/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it