


SPENCER SHELL

Barquette de sauvetage universel

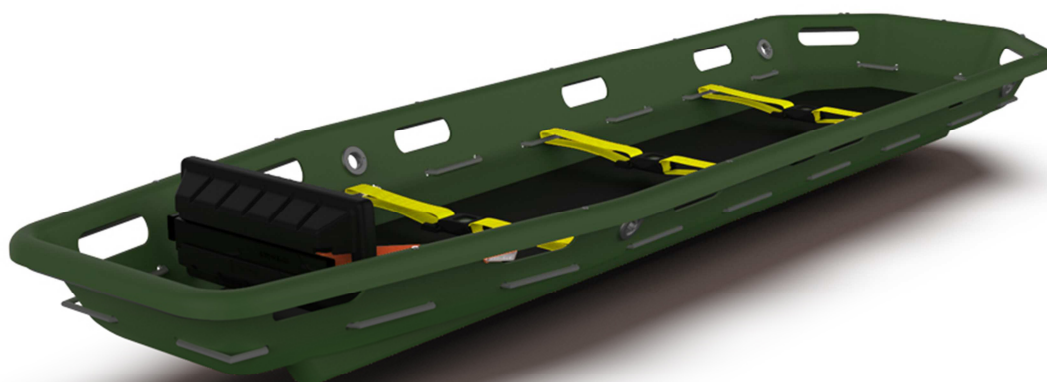

Les civières de transport Spencer Shell sont des protections pour la récupération et le transport des patients qui peuvent être utilisées pour des opérations de secours dans les cas où il est nécessaire de protéger le patient des chocs latéraux et qu'il n'est pas possible d'intervenir avec les équipements de transport normaux. Les dispositifs peuvent être reliés à un treuil avec des systèmes de levage applicables à ancrages fixes en maintenant dans tous les cas la civière en position horizontale par rapport au sol et uniquement si elle est équipée d'un système d'élingage Spencer. Le patient ne peut pas intervenir sur les dispositifs.

Caractéristiques spécifiques

Le corps à coque unique le rend extrêmement sûr et facile à gérer

Le cadre périmétrique fournit la rigidité et permet une prise ferme sur les poignées

Equipé d'œillets pour sécuriser les mousquetons

Dessus de périmètre pour la fixation des ceintures et de tous les accessoires

Traîneaux dans la partie inférieure du corps pour réduire les frictions en cas de traînée sur le sol

Matelas pour augmenter le confort du patient

Accessoires en option

ST04525B	STX 537 – Flotteurs universels un pièce
ST04518A	STX 518 – Flotteurs universels deux pièces
ST04519C	STX 519 – Système hélitreuillable réglable
ST04522B	STX 540 – Système hélitreuillable fixe
ST04040A	STX 40 – Housses de rangement pour barquettes

Accessoires de base

STX 592 - Trois sangles de maintien à 2 éléments avec boucle en métal

Repose-pieds

Données techniques

Longueur	2150 ± 10 mm
Largeur	650 ± 10 mm
Hauteur	200 ± 10 mm
Numéro des poignets	12
Matériaux	PE, PP, Al
Poids <small>(sans accessoires)</small>	12,5 ± 0,5 kg
Capacité de chargement	280 kg

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

SPENCER SHELL VERT BARQUETTE
DE SAUVETAGE AVEC 3 SANGLES
NOIRES STX592

ST04066A

Classification CND V0899

ID d'enregistrement 795311



Rev.0 (27/11/2020)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it

Rev.0 (27/11/2020)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it