


AMBU JET, HOME JET, JET WIRE

Aspiratore di secreti

Modifica filtro, riduzione pesi

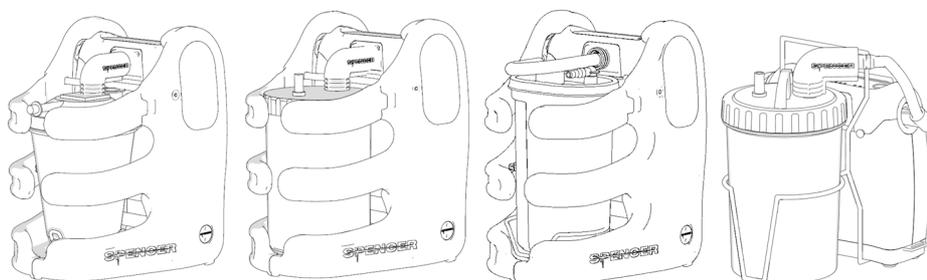

800D

1000R

1000B

WIRE



Aspiratore di secreti estremamente compatto, destinato alla rimozione dei fluidi dalle vie respiratorie o dal sistema di supporto alla respirazione. L'aspiratore crea una depressione che estrae i fluidi attraverso il catetere monouso collegato al vaso di raccolta.

Modifiche apportate

Il filtro utilizzato passa

DA

SC73013E

A

RISC005B – per 800D, 1000R, WIRE

RISC006B – per 1000B

Il peso di Homejet e Ambujet è stato ridotto approssimativamente del 10% in tutte le versioni

Disponibili manuale d'uso aggiornato e istruzioni per la sostituzione delle componenti destinate ai clienti che possiedono già il dispositivo con filtro SC73013.

Modifiche attive per ordini inseriti da inizio Luglio 2015

Caratteristiche specifiche

La connessione diretta tra vaso di raccolta e aspiratore, consentono di mantenere valori di flusso più elevati e una depressione più rapida

Scocca in grado di proteggere da urti e cadute l'intero dispositivo

Sostituzione della batteria estremamente semplice

Peso estremamente contenuto

Base d'appoggio ampia per offrire la massima stabilità

Disponibili modelli in cui il gancio è dotato di sistema di ricarica automatica, per garantire che il dispositivo sia sempre pronto all'uso

Possibilità di convertire ogni modello (tranne Wire) all'utilizzo con vasi Serres grazie all'utilizzo del kit SC75021C

Comandi semplici e intuitivi

Visualizzazione del livello di vuoto grazie ad una scala LED ad alta luminosità

Conforme a

ISO 10079-1

EN 1789 per i modelli dotati di gancio 10G o 20G

Dati tecnici

Dimensioni	200x225x285 mm
Dimensioni con gancio	200x250x320 mm
Peso	2,4 ± 0,1kg
Peso con gancio	3,1 ± 0,1kg
Range vuoto	Da 50 a 550mmHg
Aspirazione flusso libero	32 l/min
Rumorosità	70db
Requisiti connessione elettrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max, 12VDC 33W max
Batteria	12V DC Ni-MH
Durata batteria	Max 45-60min a flusso libero
Modalità d'uso	30 min. ON , 30 min. OFF
Tempo ricarica batteria	5 ore
Classificazione ISO	Alto vuoto/Alto flusso
Protezione ingresso fluidi	IP12

DM Ass. secondo la Dir. 93/42/CEE



Rev.0 (23/06/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it