


STX 90

Poggiatesta telescopico

Modifica zona di appoggio testa

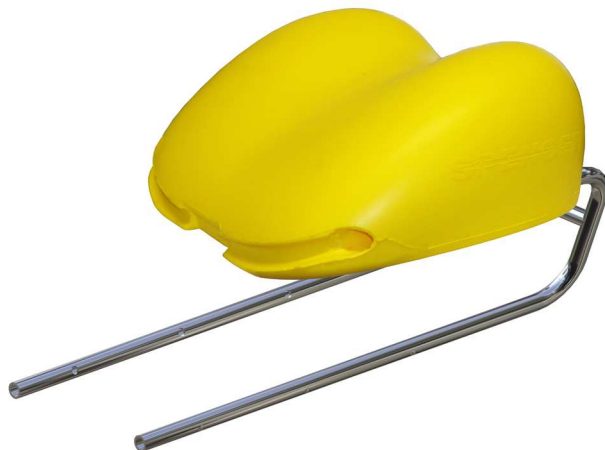

Cuscino anatomico con supporto telescopico destinato all'utilizzo con i piani delle barelle Spencer. Il dispositivo fornisce appoggio alla nuca, aumenta il comfort del paziente e migliorare l'allineamento del capo durante le fasi trasporto permettendone anche l'iperestensione.

Modifiche apportate

La base di appoggio del cuscino è stata modificata in modo da adattarsi perfettamente alla forma dei materassi Spencer, aumentando così la stabilità del cuscino

La zona di appoggio per il capo è stata completamente ridisegnata. Il cuscino può essere montato sul telaio in entrambe le direzioni, permettendo di variare il supporto fornito dal dispositivo.

Modifiche attive per i lotti successivi a P201150507

Caratteristiche specifiche

Superficie liscia facilmente igienizzabile

La conformazione consente duplice modalità di applicazione in modo da offrire tipologie di supporto differenti

Regolazione continua per offrire la massima adattabilità

I bordi rialzati permettono un accoppiamento perfettamente solidale con i materassi Spencer

Applicato con la parte alta in direzione della base del collo, permette di iperestendere il capo aumentando la pervietà delle vie aeree

Dati tecnici

Dimensioni	480x300x230 ± 10 mm
Materiali	PU, Acciaio, Nylon, poliestere
Peso	1050 ± 20 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

STX 90 POGGIATESTA
TELESCOPICO PER BARELLE

ST00491A

Classificazione CND



V0899

Rev.0 (07/09/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it